

Rezūm™

Мини-инвазивная инъекционно-паровая терапия

№	Продукт	Описание	Кол-во
M006D2201-0031	Устройство доставки Rezūm™	Стерильное устройство подачи пара Стерильный шприц Адаптер для стерильного шприца	1
G2200-0031	Генератор Rezūm	Портативный генератор Шнур питания	1

Другие материалы, которые обычно требуются для процедуры Rezūm, включают следующие предметы, но не ограничиваются ими:

- Стерильный стол/тележка
- Физиологический раствор комнатной температуры
1 л, 2 л, 3 л, 4 л, 5 л или 500 мл
- Стойка для инфузионной ситемы
- Стерильная дистиллированная вода - 50мл
- Телескоп - (30°, 4 мм, 30 см) Storz или Richard-Wolf
линзы Olympus и ACMI 30°, 4 мм имеют длину 28 см
и не подходят для устройства Rezūm.
- Водорастворимый гель для введения инструмента
- Эндоскопическая Видеосистема
- Источник света и световод
- Уретральный Катетер
- Полный перечень материалов см. в Инструкции по применению системы Rezūm.



ООО “М.П.А медицинские партнеры”
127083, Москва, улица 8-го Марта, дом 1
info@mpamed.ru / 8 (800) 777-83-33



Rezūm™

Мини-инвазивная инъекционно-паровая терапия



Boston
Scientific
Advancing science for life™



Rezūm на сайте
mpamed.ru


Мини-инвазивная инъекционно-паровая терапия Rezūm™

Система Rezūm предназначена для устранения обструкции и уменьшения объема ткани простаты и облегчения симптомов, связанных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ).

Система Rezūm генерирует тепловую энергию в виде водяного пара, который затем вводится в ткани простаты контролируемыми 9-секундными дозами. Пар, вводимый в ткань предстательной железы, быстро рассеивается в интерстициальном пространстве между клетками ткани. Контактная с тканью пар переходит в конденсированное состояние, высвобождая при этом накопленную тепловую энергию, что приводит к денатурации клеточных мембран и вызывает гибель клеток. Денатурированные клетки поглощаются организмом посредством фагоцитоза, что уменьшает объем ткани простаты, прилегающей к уретре. Процесс конденсации пара также оказывает гемостатический эффект в зоне инъекций.

Объем ткани уменьшается и это снижает симптомы, связанные с увеличением предстательной железы.

Rezūm генератор, модель G2200

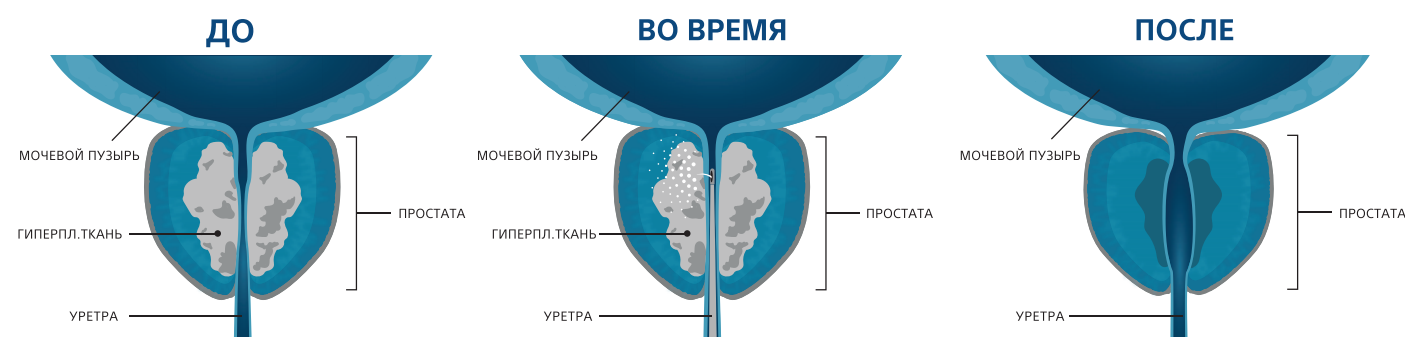

Мини-инвазивная инъекционно-паровая терапия Rezūm обеспечивает следующие преимущества для мужчин, страдающих ДГПЖ:

- Это альтернатива медикаментозному лечению ДГПЖ
- Исследования подтверждают, что Rezūm безопасно и эффективно снимает симптомы
- У большинства пациентов улучшение симптомов наблюдается от 2 до 12 недель
- Может быть выполнена под местной анестезией
- Позволяет сохранить половую и мочевыделительную функции
- Позволяет сохранить эректильную и мочевыделительную функции

Для мини-инвазивной инъекционно-паровой терапии Rezūm подходят следующие пациенты:

- Пациенты, которые решили не принимать препараты от ДГПЖ, или принимают их, но не удовлетворены, или прекратили их прием
- Пациенты, которым не показано общее обезболивание

Показания

- Объемом предстательной железы ≥ 30 -80 см³
- Гиперплазией центральной зоны и/или средней доли предстательной железы

Противопоказания

- Пациенты с пенильными имплантами

Основные показатели эффективности

Результаты по IPSS (Международная шкала оценки симптомов гиперплазии предстательной железы) стабильны и долговременны во всех исследованиях. Терапия Rezūm продемонстрировала стойкие результаты в течение 4 лет с улучшением по IPSS на 10,1 балла (46,7%) и улучшением скорости потока на +4,2 мл/сек.