

Светильники медицинские бестеневые смотровые СМС - Д1




Инновационные смотровые бестеневые светодиодные светильники СМС - Д1 объединяют в себе запатентованную технологию **MOTION-MATIC** наряду с системой интеллектуального управления и контроля светодиодами.

Компактные и надежные смотровые светильники СМС - Д1 — это сочетание дизайна и инноваций с отличным соотношением к стоимости, что делает инновации доступными для всех.

Запатентованная система MOTION-MATIC

В светильнике СМС - Д1 используется инновационная запатентованная технология MOTION-MATIC.

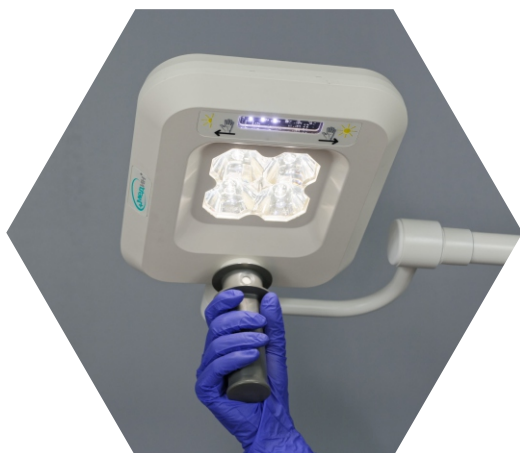

Простота использования

Светильник включается автоматически при движении. Медицинский персонал может сразу приступить к работе, экономя время. В конце процедуры светильник следует направить на потолок для выключения.

Энергосбережение

Благодаря запатентованной технологии Motion-Matic, светильник автоматически выключается при отсутствии движения в течение 30 минут. Таким образом, СМС - Д1 является современным светильником.

Контроль движений

Светильник позволяют регулировать интенсивность освещения движением руки, не касаясь купола

Продуманный дизайн

Светильник изготовлен из инновационного полиэфира, отвечающего условиям безопасного использования в больничной среде:

- устойчивый к дезинфицирующим средствам
- отличная система амортизации
- не желтеющий со временем корпус
- противопожарный и термостойкий (индекс 5VA)




Дизайн

СМС - Д1 — это компактный хирургический светильник, состоящий из четырех светодиодов.




Доступные конфигурации


Потолочный

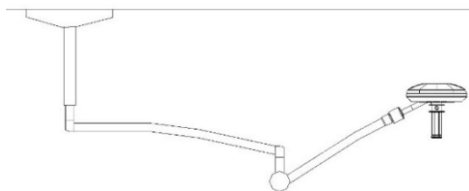

Настенный

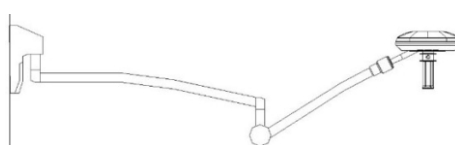

Передвижной

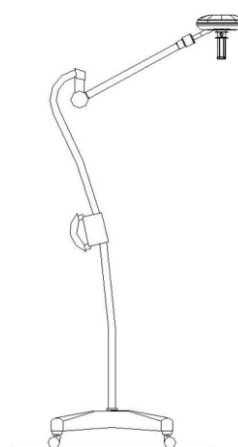

Опция

Источник резервного питания
В случае отключения электроэнергии источник резервного питания позволяет светильнику работать в течение 7 часов.

Технические характеристики

СМС - Д1

Источник света	LED (светодиод)
Максимальная центральная освещенность (Ес)*	65 000 Люкс
Регулировка интенсивности света*	от 30 000 до 65 000 Люкс
Фиксированный диаметр светового поля	14 см
Глубина освещения L1+L2 (60% Ес) 2008*	131 см
Индекс цветопередачи Ra*	96
Цветопередача красного оттенка R9*	95
Цветовая температура*	4200 К
Срок службы светодиодов	60 000 ч
Максимальный уровень потребления	7 Вт
Габаритные размеры светильника	30x24,5 см

*Обычные значения, полученные на расстоянии 1 м в соответствии с нормами IEC 60601-2-41 (предел допускаемой погрешности 0%-10%). Данные значения могут изменяться в процессе технического усовершенствования и обновления изделия. Хирургические светильники СМС-Д1 соответствуют стандартам IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 и IEC 60601-2-4.